

geemarc



CLA 7

N e c k L o o p


GB User guide p.2

F Notice d'utilisation p.5

1 - GENERAL

The mobile CLA 7 inductive loopset is for people with hearing aids. When you use the CLA 7, you can also speak directly to your caller by the microphone inside the system. So, the device works as a wireless system. Compatible with our products: Ampli DECT, CL200, 400, 500 & with most cellular phones (you may need to purchase a connector if your mobile does not have a suitable headset socket).

Don't forget to switch your hearing aid to T mode.

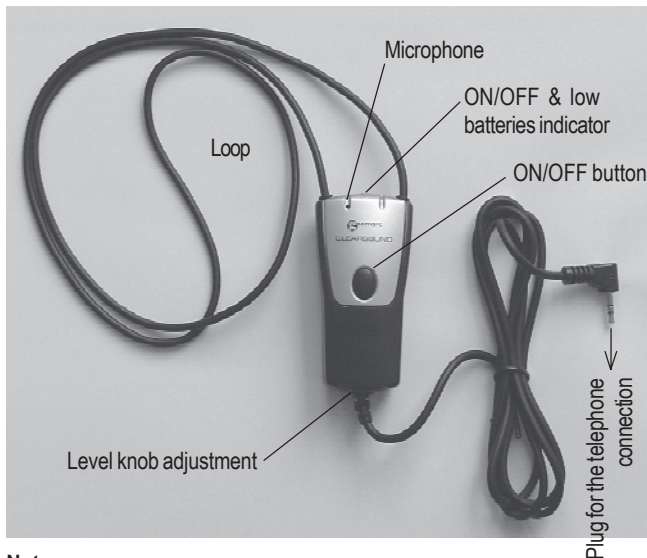

Note :

OFF : LED is off

ON : LED is green

Low battery : LED is red

2 - CONNECTING

- Open the battery compartment.
- Insert 2 AAA 1.5V type alkaline batteries without mercury, making sure the polarity is according to the diagram in the battery compartment.
- Replace the battery cover.

Now, the CLA 7 is ready to use.

Note :

- Always disconnect the plug of the CLA7 from the telephone before installing the batteries.
- Do not dispose of batteries in household rubbish. Pay attention to the battery regulations regarding battery disposal.

3 - MAKING AND RECEIVING CALLS

- Place the loop around your neck.
 - Connect the plug to the headset socket of your telephone(*).
- (see the instruction manual of your telephone - if you have a problem locating the socket).
- Switch your hearing aid to T mode.
 - Now you are ready to speak through your CLA 7. Press the **ON/OFF** button.

The green light will turn on.

- During the call, you can adjust the volume of the device by using the volume control knob located on the bottom of the CLA 7.
- On completion of the call, press the **ON/OFF** button.

The green light turn off.

Do not forget to turn OFF your CLA 7 at the end of the call. Failure to do this will drain the batteries after about 30 hours. Please consult your dealer for details of our high capacity rechargeable batteries and rapid battery charger. In the unlikely event that your dealer does not stock this item, please visit our website www.geemarc.com or call our HOTLINE

01707 38 44 38

4 - GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATION : Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC.



For product support and help visit our website at

www.geemarc.com

telephone 01707 384438

or fax 01707 372529


1 - GENERAL

Le CLA7 est destiné aux personnes porteuses de prothèses auditives à bobines en T.

Lorsque vous utilisez le CLA7, vous pouvez parler directement à votre interlocuteur par le microphone situé à l'intérieur du boîtier.

Compatible avec nos produits : AmpliDECT, CL200, 400, 500 et avec la plupart des téléphones cellulaires.

Ne pas oublier de placer votre appareil auditif en mode T.

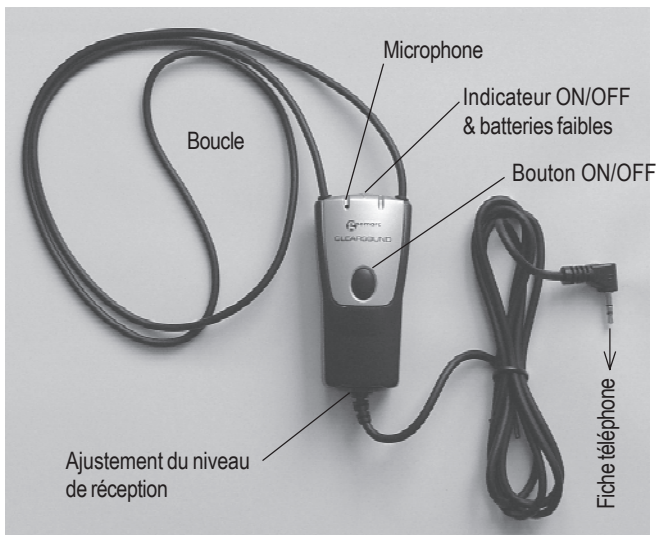

Note :

Si l'indicateur passe au rouge lorsque le CLA7 est en service, cela indique que les piles sont faibles.

2 - CONNECTION

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez 2 piles alcalines (nous fournis) sans mercure (type AAA 1.5V) en respectant les polarités dans le compartiment.
- Refermez le compartiment.

Votre CLA7 est maintenant prêt a fonctionner.

Note :

- Débranchez l'appareil avant l'installation des piles
- Ne pas jeter les piles usagées dans votre poubelle. Déposez les dans un endroit prévu a cet effet.

3 - UTILISATION

- Passez le dispositif autour du cou.
- Connectez la fiche téléphonique dans la fiche correspondante de votre téléphone(*). (Voir le manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus de renseignements concernant la localisation de cette prise).
- Basculez l'audiophone en mode T.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour mettre en service le CLA7.
Le voyant vert s'allume.
- Pendant la conversation, vous pouvez ajuster le niveau de réception à l'aide de la molette située au bas du CLA7.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche **ON/OFF** pour couper le CLA7.

Ne pas oublier d'arrêter le CLA7 en fin de conversation. Si vous oubliez, les piles seront déchargées après 30 heures environ.
Vous pouvez nous commander un chargeur avec ses batteries. Pour cela, contactez nous au :
03 28 58 75 99.

4 - GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie.

En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE.



**Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe**

**TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99**

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>